Stratacel®

Fraksiyonel işlem sonrası
gelişmiş pansuman

İşlem sonrası bakımda çığır açan teknoloji



İyileşme süresini yarı yarıya azaltır[1]

"Yeni nesil yara pansumanı Stratacel®, standart bakım ürünleriyle (petrol bazlı, vazelin vb.) karşılaştırıldığında herhangi bir yan etki bildirilmeksizin, PCIT sonrası akut enflamasyon belirtilerini azaltmış ve hasta perspektifinden daha olumlu sonuçlar vermiştir"

Gold, M., et al. (2019). J of Cosmetic Dermatology, 18 (2)



www.stratacel.tr

Switzerland
Stratpharma
Heal Better™

İşlem sonrası bakımın önemi

Cildi farklı derinliklerde özenle ve hassasiyetle 'hasara uğratan' ileri teknolojilerin gelişmesiyle, **minimal invaziv fraksiyonel işlemler** oldukça popüler hale gelmiştir.[2]

En yeni teknolojiler ve teknikler kullanılsa bile, doğru bir tedavinin ardından uygulanan işlem sonrası bakım, **işlemin kendisi kadar kritik bir öneme sahiptir.** Mükemmel sonuçlara ulaşmak, yüksek hasta memnuniyeti sağlamak ve iyileşme süresini en aza indirmek için anahtar rol oynar.[2]

İyileşmeyi desteklemeye, enfeksiyon riskini azaltmaya ve cilt durumunu daha da bozabilecek **tahriş edici faktörlere karşı cildi korumaya yönelik ideal bir ortam oluşturarak cilt bariyerinin yeniden kazandırılması** önemlidir.

İyileşme süresinin ve işlem sonrası reaksiyonların şiddetinin hızla azaltılması, hastaların işlemden duyduğu memnuniyeti artırırken genel tedavi başarısını da en üst seviyeye çıkarır.[1]

İşlem sonrası için mevcut tedavi seçenekleri

Petrol jeli (vazelin) bazlı ve **tam oklüzif (gözenekleri tamamen kapatan)** ürünlerle yapılan bakımlar ısının yaradan veya hasarlı cilt yüzeyinden kolayca uzaklaşmasına izin vermemesi nedeniyle ideal bir tercih değildirler. Çünkü bu durum cildin yumuşayıp bozulmasına (maserasyon), kızarıklığa (eritem) ve inflamasyona yol açabilir.[1]



Pomadlar (merhemler) ve nemlendiriciler yara için ideal nem düzeyine sahip bir iyileşme ortamı yaratamazlar. Oysa **cildin nemli tutulması, iyileşme sürecini %40'a varan oranda hızlandırabilir.**[1]

Piyasada satılan maskeler gibi **fiziksel pansumanlar,** özellikle göz kapakları ve dudak çizgisi gibi **kıvrımlı bölgelerde** işlem yapılan alana **tam olarak temas edemez.** Hastanın yüzüne uygulanması oldukça zahmetli olan bu yöntemler bu nedenle ideal değildir. Bu doğrultuda **en çok tercih edilen seçenek, topikal krem veya jellerdir.**[1]

İdeal bakım ürünü; iyileşmeyi hızlandırmalı, yan etkileri azaltmalı ve cildi korumalıdır. Ayrıca şeffaf ve yarı geçirgen olmalı ve evde kolayca uygulanabilmelidir.[1,2]

Stratacel® – İşlem sonrası bakımın ilk basamağı[1]

DAHA KISA İYİLEŞME SÜRESİ — **İşlem sonrasında sadece 2 gün boyunca Stratacel uygulanması bile diğer standart bakım ürünlerine kıyasla toparlanma süresini yarı yarıya azaltır.**

KONFORLU BİR YENİLENME SÜRECİ — Stratacel **daha hızlı iyileşmeyi destekler** ve **akut semptomları azaltır;** böylece hem genel tedavi sonuçlarının gözle görülür şekilde iyileşmesini sağlar hem de **hasta memnuniyetini artırır.**

NEMİNİ KORUYAN BİR CİLT — **Stratacel, epidermis tabakasına nazikçe tutunan özel formülü sayesinde fraksiyonel lazer uygulamaları sonrasında** tercih edilebilecek **en ideal yara pansumanı** seçeneğidir.

YARA BAKIM ÖRTÜSÜ — Stratacel, ÜTS Kayıtlı bir Sınıf IIa Tıbbi Cihazdır.



Stratacel® endikasyonları


Stratacel, **fraksiyonel işlemler sonrası hasar görmüş ve yapısı bozulmuş cildin onarımını destekleyen,** film oluşturma özelliğine sahip, esnek ve gelişmiş bir yara pansumanıdır.

KOZMETİK ENDİKASYONLAR / İŞLEMLER

- Lazer işlemleri (fraksiyonel)
- Kimyasal peeling (yüzeysel)
- Vajinal gençleştirme
- Mikrodermabrazyon (cilt soyma)
- Radyofrekans uygulamaları
- Microblading (kaş Tasarımı)
- PRP (plazma) tedavisi
- Kolajen indüksiyon tedavisi
- Dövme silme (fraksiyonel lazerle)
- Diğer fraksiyonel cihaz uygulamaları

TIBBİ ENDİKASYONLAR / İŞLEMLER

- Kriyocerrahi / Kriyoterapi (aktinik keratoz tedavisi)
- 5-FU (Florourasil) tedavisi sonrası
- Medikal / Tıbbi dövme (örn. meme rekonstrüksiyonu sonrası)
- Enflamatuar (iltihaplı) deri hastalıkları ve reaksiyonları
- 1'nci ve 2'nci derece yanıklar (epidermis hasarlı)

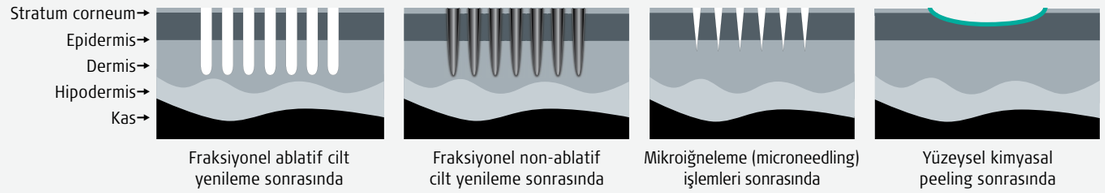

Stratacel® neden yenilikçi bir üründür?

FİLM OLUŞTURAN YARA ÖRTÜSÜ
Stratacel kuruyarak, ciltle sürekli ve kesintisiz temas sağlayan ince, esnek ve tam yüzey kaplamalı bir yara örtüsü formu kazanır.

İŞLEMDEN HEMEN SONRA KULLANIM
Stratacel fraksiyonel işlemlerin hemen ardından güvenle kullanılabilir

İYİLEŞME SÜRESİNDE BELİRGİN AZALMA
Stratacel nemli bir iyileşme ortamı sunarak daha hızlı bir re-epitelizasyon sağlar ve günlük hayata dönüş süresini belirgin şekilde kısaltır.

SEMPTOMATİK RAHATLAMA
Stratacel kaşıntı, yanma hissi ve rahatsızlık gibi şikayetlere karşı semptomatik rahatlama sağlar ve cildin hasar görmesindenkaynaklanan kızarıklık ve renk değişikliğini azaltır.

NEMLENDİRME VE GAZ GEÇİRGENLİĞİ
Yarı kapayıcı (semi-oklüzif) ve gaz geçirgen bir yapıya sahip olan Stratacel, cildin nefes almasına izin verirken aynı zamanda nemini korumasını sağlar.



KORUMA
Stratacel bakteriyostatiktir ve bariyeri bozulmuş cildi kimyasal ve mikrobiyal etkenlere karşı korurken kontakt dermatit (tahriş/alerji) riskini azaltır.

REAKTİF OLMAYAN İÇERİK
Stratacel inert bir üründür. Ölçülebilir bir pH değeri yoktur ve steroid, alkol, paraben veya parfüm içermez.

KOZMETİK ÜRÜNLERLE UYUMLU
Stratacel kuruduktan sonra üstüne güneş kremi veya kozmetik ürünler kullanılabilir.

KULLANIMI KOLAY
Stratacel, evde kolayca uygulanabilen konforlu bir üründür. Yeni bir katman sürülmeden önce eski tabakanın temizlenmesi gerekmediğinden hastanın tedavi devamlılığını kolaylaşır ve bakım sürecine bağlılık önemli ölçüde artar.

Stratacel® ve Petrol Jeli Bazlı Kremlerin Karşılaştırması[1]

Hasta kontrollü klinik veriler: Stratacel'in, fraksiyonel radyofrekanslı mikro iğneleme (altın iğne) işlemi sonrasında gelişen akut enflamatuar reaksiyonların şiddetini, süresini ve sosyal hayata dönüş süresini azaltmadaki etkinliğini değerlendirmek amacıyla ABD'de 20 hastanın katıldığı, yüzün iki yarısının kıyaslandığı (split-face) randomize bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Stratacel, standart bakım ürünüyle (vazelin bazlı bir merhem olan Aquaphor®) karşılaştırılmıştır.[1]

Yayınlanan çalışmayı okumak için tarayın

Gold, M., Biron, J. (2019). 'Randomized, single-blinded, crossover study of a novel wound dressing vs current clinical practice after Percutaneous collagen induction therapy', Journal of Cosmetic Dermatology, 18(2), pp. 524-529.


Kızarıklığın hızla giderilmesi, cildin onarım sürecine (remodeling) çok daha çabuk geçtiğinin kanıtıdır. Bu süreç, hastanın sosyal hayata dönüşünü hızlandırırken, rahatsızlık hissini azaltır ve işlemin görsel başarısını en üst seviyeye taşır.

İşlem sonrası **Stratacel kullanımının henüz 2. gününde, sosyal hayata dönüş süresinin** petrol jeli bazlı ürünlere göre **%50 oranında kısaldığı görülmüştür.**

Stratacel uygulamasının 7. günüde, petrolatum bazlı ürünlere kıyasla **cilt kızarıklığını (eritem) %63 daha fazla azalttığı görülmüştür.**


Stratacel, iyileşmenin çok erken evrelerinden itibaren **enflamasyonu normalleştirir, post-enflamatuar hiperpigmentasyon (lekelenme) riskini azaltır** ve koyu ten tiplerinin tedavisinde önemli bir rol oynar.

İşlemden hemen sonra

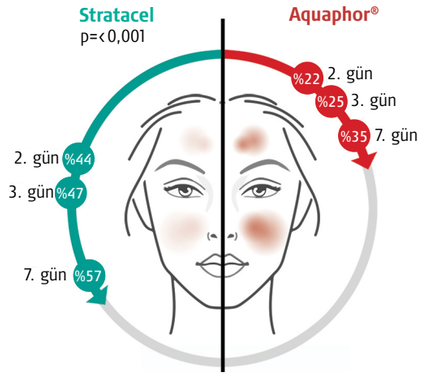

Cilt kızarıklığında azalma (Hemoglobinde başlangıca göre iyileşme, Antera 3D Kamera ile ölçülmüştür)

Antera 3D Kamera Analizi Hemoglobin

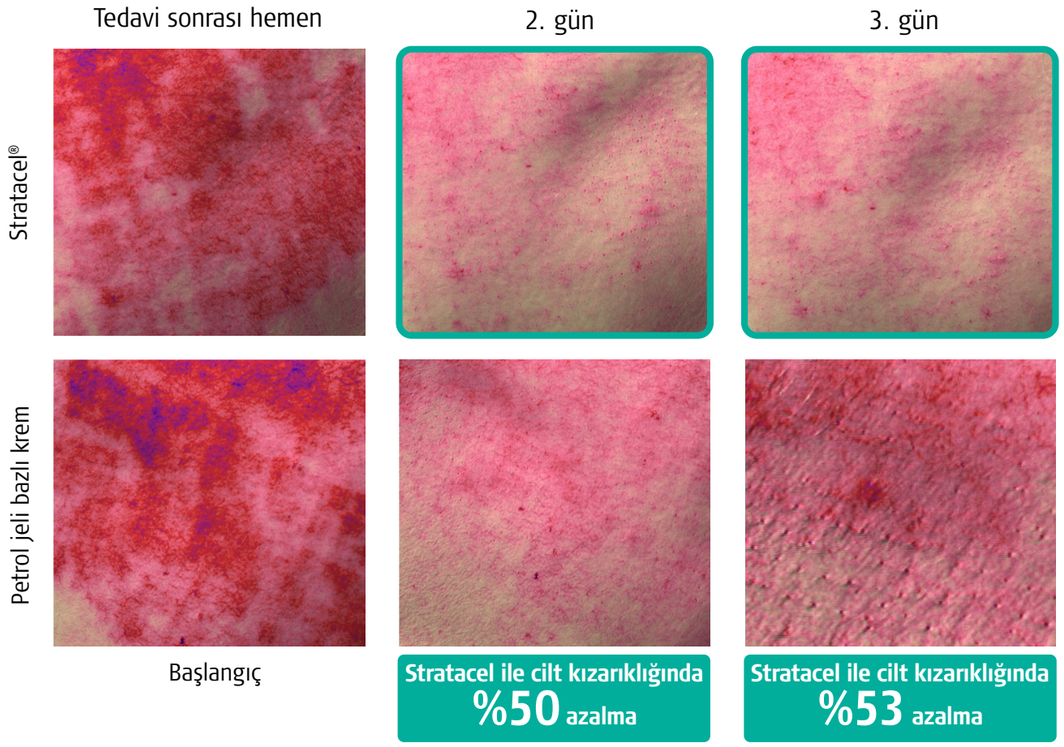

Stratacel® ve Termal Kaynak Suyu ve Vazelin®

Hasta kontrolünde klinik veriler: Ablatif fraksiyonel CO^2 lazer cilt yenileme işlemi sonrasında, **Stratacel'in etkinliğini standart bakımla (Termal Kaynak Suyu + beyaz petrol jeli/Vazelin) karşılaştırmak amacıyla** İtalya'da 5 hastadan oluşan, yüzün iki yarısının kıyaslandığı (split-face), tek kör, karşılaştırmalı bir vaka çalışması yürütülmüştür.[2]

Yayınlanan çalışmayı okumak için tarayın

Marini, L. (2017). 'Advanced film-forming gel formula vs spring thermal water and white petrolatum as primary dressings after full-face ablative fractional CO2 laser resurfacing: a comparative split-face pilot study', J of the European Academy of Dermatology and Venereology, 32(1), pp. 113-116

Stratacel, yara iyileşmesi için estetik kaygıları da gideren etkili bir çözüm sunar. Kolay uygulanabilirliği ve koruyucu bir mikro-iyileşme ortamı oluşturma özelliği, **optimal ve daha hızlı yara iyileşmesine** katkı sağlar.

Stratacel, normal fizyolojik koşullara benzer şekilde, **geçici bir epidermal bariyer işlevini yeniden oluşturma** konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptir.


İşlem sonrası 7. günde:

- Stratacel uygulanan tarafta, cilt yüzeyindeki **mikro dokusal değişikliklerde gözlemlenen %85'lik azalma,** standart tedaviye kıyasla **daha hızlı ve pürüzsüz bir re-epitelizasyonu** doğrulamaktadır.
- Stratacel uygulanan tarafta, **yüzeysel melanin içeriğinde gözlemlenen %72'lik azalma,** standart tedaviye kıyasla **ilk inflamatuar evre ile erken remodeling evresi arasında önemli ölçüde daha pürüzsüz bir geçiş** olduğunu ortaya koymaktadır.

Stratacel, biyolojik olarak aktif tüm hücrelerin, sitokinlerin ve büyüme faktörlerinin bütünlüğünü koruyarak yara iyileşmesi süresince kesintiye uğramadan çalışmalarına olanak tanır. Bu koruma, **post-inflamatuar hiperpigmentasyon riskini azaltır.**



Uygulamadan 15 dakika sonra hemoglobin değişimi ile ölçülen akut eritem[3]

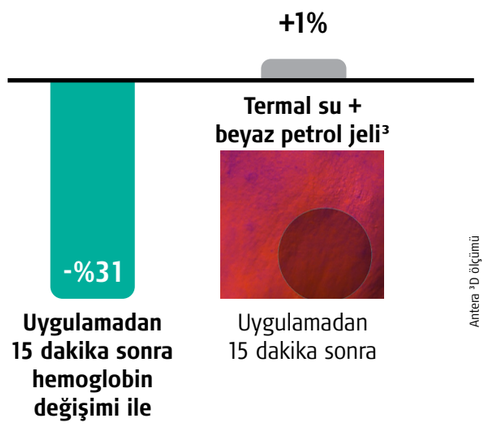

Stratacel® ile elde edilen klinik sonuçlar - Öncesi ve sonrası

Kompleks Düzeltici Cilt Yenileme - Yüz[4]

Dr. Marini - SDC The Skin Doctors Center, Trieste, Italy



İşlem öncesi



İşlem sonrası, Stratacel tedavi başlangıcı 0. gün



Stratacel tedavisi 9. gün

Fraksiyonel Lazer Cilt Yenileme - Yüz[4]

Dr. Marini - SDC The Skin Doctors Center, Trieste, Italy



İşlem sonrası, Stratacel tedavi başlangıcı 0.gün



Stratacel tedavisi 2. gün



Stratacel tedavisi 7. gün

Fraksiyonel Lazer Cilt Yenileme - Ağız çevresi[5]

Dr. M. Sandhofer - Linz, Austria



İşlem öncesi



İşlem sonrası, Stratacel tedavi başlangıcı 0.gün



Stratacel tedavisi 10. gün

Fraksiyonel Lazer Cilt Yenileme - Göz çukuru çevresi[4]

Dr. Marini - SDC The Skin Doctors Center, Trieste, Italy



İşlem sonrası, Stratacel tedavi başlangıcı 0.gün



Stratacel tedavisi 7. gün

Mevcut boyutlar

Stratacel, sıradan nemlendirici krem veya jellerle kıyaslandığında, uygulama başına **önemli ölçüde daha az ürün gerektiren gelişmiş bir formülasyona sahiptir.**



Stratacel 10g

6x6 cm büyüklüğündeki bir alana 60 günden fazla süre boyunca günde iki kez uygulama yapmak için yeterlidir.



Stratacel 20g

6x12 cm büyüklüğündeki bir alana 60 günden fazla süre boyunca günde iki kez uygulama yapmak için yeterlidir.



Stratacel 50g

12x15 cm büyüklüğündeki bir alana 60 günden fazla süre boyunca günde iki kez uygulama yapmak için yeterlidir.

Kullanım talimatları



1. Uygulama yapılacak cildin veya yüzeysel yaranın temiz olduğundan emin olun. Elinizi sürmeden önce, bölgedeki aşırı eksüdayı (yara sıvısını) temiz bir bez veya pamukla nazikçe kurulayarak mümkün olduğunca uzaklaştırın.



2. Stratacel'i doğrudan etkilenen bölgeye çok ince bir tabaka halinde sürün ve jel kuruyana kadar bekleyin. Doğru miktarda uygulandığında Stratacel 5-6 dakika içinde kendiliğinden kurur. Ciltte reaksiyon riskini en aza indirmek için Stratacel, uygulama yapılan cilt bölgesine doğrudan temas eden ilk katman olarak sürülmelidir.



3. Eğer jelin kuruması uzun sürüyorsa, muhtemelen gereğinden fazla ürün uygulamışsınızdır. Bu durumda, cildin üzerindeki fazlalığı temiz bir peçete veya gazlı bezle hafifçe silerek alın ve kalan jelin kurumasını bekleyin. Eğer üzerini tıbbi bir sargı/bandaj ile kapatacaksanız, jelin kurumasını beklemenize gerek yoktur.



4. Stratacel kuruduktan sonra üzerine güneş kremi ve makyaj ürünleri uygulayabilir veya kıyafetlerinizi giyebilirsiniz. Gün içinde cildinizde kuruluk veya gerginlik hissederseniz, Stratacel'i ihtiyaç duyduğunuz sıklıkta yeniden uygulayabilirsiniz.

En iyi sonuçlar

- Stratacel günde bir kez veya dış etkilere açık/açıkta kalan bölgelere **günde iki kez uygulanmalıdır.** Etkilenen yüzeyle temasın sürekliliğini sağlamak adına ihtiyaç duyuldukça ya da doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılabilir.
- En iyi sonuçlar için Stratacel'in ciltle sürekli (7 gün 24 saat) temas halinde olması gerekir.
- Stratacel'in **işlemden hemen sonra kullanılmaya başlanması** ve cilt tamamen iyileşene kadar kullanıma devam edilmesi önerilir.
- Cilt yenileme (resurfacing) ve **ablatif işlemler sonrası minimum 30 gün boyunca** veya daha fazla bir iyileşme gözlenmeyene kadar sürekli kullanım tavsiye edilir.
- Stratacel tamamen kuru olmadığında giysilerde leke bırakabilir. Ürün lekesi olması durumunda normal yıkama ile giysilerden çıkmıyorsa kuru temizleme işlemi kumaşa zarar vermeden lekenin çıkarılmasını sağlayacaktır.
- **Ekstra nemlendirici veya losyon kullanımına ihtiyaç yoktur.** Stratacel, hasarlı ciltteki su kaybını engelleyerek kuruluk hissinin önüne geçer. Gerginlik hissini önlemek için gün içinde Stratacel'i daha sık tazeleyebilirsiniz. Stratacel'in cilde ilk temas eden katman olma özelliğini korumak için, illaki nemlendirici kullanılacaksa ürün kuruduktan sonra sürülmelidir. Stratacel'in aksine nemlendiriciler ciltte irritasyona (tahrişe) neden olabilir. Stratacel'in üzerine başka herhangi bir ürün eklemenin ürünün etkinliğini azaltabileceği dikkate alınmalıdır.
- Stratacel, stratum corneum seviyesinin altına nüfuz etmediğinden etkinliği artırmak için **ovulmasına gerek yoktur.**
- Stratacel, genel tedavi sonuçlarını artırmak amacıyla diğer tamamlayıcı tedavilerle birlikte de kullanılabilir.
- Doktorunuz tarafından aksi önerilmedikçe, **Stratacel topikal ilaçların üzerine uygulanmamalıdır.**
- İşlem sonrasında oluşabilecek yangı hissini azaltmaya yardımcı olmak için Stratacel uygulama öncesi **buzdolabında soğutulabilir.**

ÖNEMLİ

Stratacel yarı geçirgen bir yapıya sahip olduğu için:

- Stratacel, bir aktif bileşenin üzerine uygulandığında bileşenin etkisini artırabilir.
- Aktif bileşenler Stratacel'in üzerine uygulandığında bunların emilimini önleyebilir veya azaltabilir.

Stratacel®

Fraksiyonel işlem sonrası
gelişmiş pansuman

Stratacel® - Daha hızlı iyileşme ve fraksiyonel işlemler sonrasında günlük hayata daha kısa sürede dönüş



Fraksiyonel işlemlerden hemen sonra uygulanabilir. Kuruduktan sonra üzerine güneş kremi veya kozmetik ürünler sürülebilir.

Stratacel, nemli bir iyileşme ortamı sağlayarak şunları destekler:

- Daha hızlı iyileşme (reepitelizasyon)
- Enflamasyon, kızarıklık ve yangı hissinin azalması.

Nefes alabilir ve nemlendirici: Gaz geçirgen ve yarı kapatıcı formülasyon

Bakteriyostatik yara pansumanı

Kolay uygulama

Stratpharma ürünleri, sipariş ve tedarik konularındaki sorularınız için Türkiye Distribütörü Saf Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile iletişime geçebilirsiniz: +90 212 287 44 77 veya info@safsaglik.com

www.stratacel.tr

Dikkat: Her zaman etiketi okuyun ve mutlaka verilen talimatlara uygun şekilde kullanın. Yalnızca harici kullanım içindir. Stratacel gözle temas ettirilmemelidir. Stratacel, doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe topikal ilaçların üzerine uygulanmamalıdır. Stratacel tamamen kuru olmadığında giysilerde leke bırakabilir. Lekelenme oluşursa, kuru temizleme işlemi kumaşa zarar vermeden lekenin çıkarılmasını sağlayabilir. Doğru depolama için lütfen tüpü kapağından sıkıca kapatın. Yaranızda enfeksiyon belirtileri olması veya ürün uygulamasının üzerinden 30 gün geçmesine rağmen yaranızın iyileşmemesi durumunda doktorunuza danışın. Tahriş oluşması halinde, kullanımı durdurun ve doktorunuza danışın. Son derece eksudatif olan yaralar, tünel yaraları veya 3. derece yanıklar için uygun değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Tüpün üzerinde yazılı son kullanma tarihi (SKT) sonrasında kullanmayın. Tüpün açılması, son kullanma tarihi (SKT) değiştirmez. Hasar görmüş tüpleri kullanmayın. Stratacel özel bertaraf yöntemleri gerektirmez. Lütfen yerel bertaraf düzenlemelerinize uyun. Açılana kadar sterildir. **İçindekiler:** Polidimetilsiloksanlar, siloksanlar, alkilmetil silikonlar.

Kaynaklar: 1. Gold, M., et al. (2019). *J of cosmetic dermatology,* 18(2), pp. 524-529. 2. Marini, L. (2017). *J of the European Academy of Dermatology and Venereology,* 32(1), pp. 113-116. 3. Data on file, 2017 (Dr. Marini). Stratpharma AG. 4. Courtesy of Leonardo Marini, MD – SDC The Skin Doctors Center Trieste, Italy, 2017. 5. Sandhofer, M., Schauer, P. (2012). *SKINmed,* 10(6), pp. S1-S7.

Üretici: Stratpharma AG, Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basel, İsviçre

Türkiye Distribütörü: Saf Sağlık Hizmetleri A.Ş. Ayazma Cad. Papirüs Plaza No:37
34406, İstanbul, Türkiye. www.safsaglik.com

CE 2797 FDA REGISTERED

Stratacel, CE uygunluk işaretine sahip Sınıf IIa Tıbbi Cihazdır.
Stratacel, FDA kayıtlı Sınıf I Tıbbi Cihaz statüsündedir.
Stratacel, T.C. Sağlık Bakanlığı ÜTS kaydına sahiptir.

Switzerland
Stratpharma
Heal Better™

SC-TR-013-1-1026