Stratacel®

Fraksiyonel işlem sonrası
gelişmiş pansuman

İşlem sonrası bakımda çığır açan teknoloji

Daha hızlı iyileşme ve günlük hayata daha kısa sürede dönüş



İyileşme süresini yarı yarıya azaltır[1]



www.stratacel.tr

Switzerland
Stratpharma
Heal Better™

Cilt Gençleştirme Uygulamaları

Fraksiyonel işlemler, kolajen üretimini uyarmak için cilt yüzeyinde noktasal mikro hasarlar oluşturarak cildin daha pürüzsüz ve genç bir görünüm kazanmasını sağlar.

Mümkün olan en iyi sonucu elde etmek, iyileşme sürecini kısaltmak, enfeksiyon riskini azaltmak ve bu süreci hasta için olabildiğince konforlu hale getirmek adına bu tedavilerden sonra titiz bir bakım uygulanması şarttır.

En sık görülen yan etkiler:

- Yanma hissi ve rahatsızlık
- Ciltte kaşıntı ve ödem (şişlik)
- Cilt kızarıklığı
- Enfeksiyon riski

En iyi estetik sonucu elde etmek için, işlem sonrası bakım en az işlemin kendisi kadar önemlidir. Bu süreçte, belirli kriterleri karşılayan bir bakım ürünü seçilmesi hayati önem taşır.[2]

İşlem Sonrası Bakım İçin İdeal Ürün

İşlem sonrasında kullanılan, **cildin hava almasını engelleyen, tamamen kapatıcı (oklüzif), vazelin bazlı ürünler** yanma hissini artırdıkları için **ideal bir seçenek değildir.** Buna ek olarak, cildin yumuşamasına ve bütünlüğünün bozulmasına yol açan maserasyona neden olabilirler; bu da **iyileşmeyi geciktirebilir ve bakteri üremesine zemin hazırlayabilir.**[1]

Pomadlar (merhemler) ve nemlendiriciler, uygulama sonrasında optimum sonuçların elde edilmesi için ihtiyaç duyulan ideal yara iyileşme ortamını sağlamakta yetersiz kalırlar.[1]



İdeal bir bakım ürünü şu özellikleri taşımalıdır:[1,2]

- **Şeffaf olmalı,** iyileşme takip edilebilmelidir
- **Yarı geçirgen olmalı,** cilt nefes alabilmelidir
- Evde kolayca uygulanabilmelidir
- Cildi dış etkenlere karşı korumalıdır
- İyileşmeyi hızlandırmalıdır
- Yan etkileri azaltmalıdır

Stratacel®: İşlem sonrası bakımın ilk basamağı[1]

DAHA KISA İYİLEŞME SÜRESİ:
İşlemden hemen sonra uygulanan Stratacel, standart bakım ürünlerine kıyasla **iyileşme süresini yarı yarıya azaltır.**

KONFORLU BİR YENİLENME SÜRECİ:
Stratacel hızlı iyileşmeyi destekler ve akut semptomları hafifletir. Böylece hem tedavinin gözle görülür başarısını artırır hem de hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI (ÜTS Kayıtlı), SINIF IIa TIBBİ CİHAZ / YARA PANSUMANI:
Stratacel, kuruyarak cilt üzerinde ince, esnek ve yüzeyle tam temas eden bir koruyucu tabaka (yara örtüsü) oluşturur; cildin sürekli koruma altında kalmasını sağlar.

SEMPTOMATİK RAHATLAMA:
Hasar görmüş ciltte oluşan kaşıntı, yanma hissi ve rahatsızlığı giderir; işleme bağlı kızarıklık ve renk değişimlerini azaltır.



Stratacel®, aşağıdaki işlemlerden hemen sonra kullanmak için geliştirilmiştir:

Tıbbi işlemler:

- Kriyocerrahi / Kriyoterapi (aktinik keratoz tedavisi)
- 5-FU (florourasil) tedavisi sonrası
- Medikal / Tıbbi dövme (örn. meme rekonstrüksiyonu sonrası)
- Enflamatuar (iltihaplı) deri hastalıkları ve reaksiyonları
- 1. ve 2. derece yanıklar (epidermis hasarlı)

Estetik ve Kozmetik işlemler:

- Lazer işlemleri (fraksiyonel)
- Kimyasal peeling (yüzeysel)
- Vajinal gençleştirme
- Mikrodermabrazyon (cilt soyma)
- Radyofrekans
- Microblading (kaş Tasarımı)
- Micro iğneleme (microneedling)
- PRP (plazma) tedavisi
- Kolajen İndüksiyon Tedavisi
- Dövme sildirme (fraksiyonel lazerle)
- Diğer fraksiyonel cihaz uygulamaları

Stratacel, mevcut epidermise (üst deriye) hafifçe tutunacak özel bir kıvamda geliştirilmiştir. Bu yapısı sayesinde, özellikle fraksiyonel cilt hasarlarından sonra kullanım için ideal bir işlem sonrası koruyucu tabaka (yara örtüsü) işlevi görür.


Stratacel® ile Petrol jeli bazlı kremlerin karşılaştırması

Fraksiyonel radyofrekanslı mikro iğneleme (altın iğne) işlemi sonrasında oluşan ani kızarıklık ve reaksiyonların şiddetini, süresini ve günlük hayata dönüş süresini kısaltmada Stratacel®'in başarısını diğer standart ürünlerle karşılaştırmak amacıyla, ABD'de 20 hastanın katılımıyla yüzün iki ayrı yarısında test edilen (split-face), rastgele seçimli (randomize) bir klinik çalışma yapılmıştır.[1]

Stratacel iyileşme süresini yarı yarıya azaltır



İşlemden hemen sonra

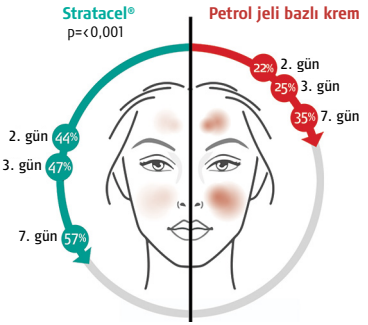


Cilt kızarıklığında azalma (Hemoglobinde başlangıca göre iyileşme, Antera 3D Kamera ile ölçülmüştür)

İşlemden sonra **Stratacel® uygulamasının henüz 2. gününden itibaren, toplam iyileşme ve günlük hayata dönüş** süresi vazelin bazlı ürünlere kıyasla **%50 oranında kısalır.**

Üstelik **Stratacel®, 7. günde ciltteki kızarıklıkları** diğer sıradan kremlere göre **%63 daha hızlı ve etkili bir şekilde giderir.**

Antera 3D Kamera Analizi Hemoglobin

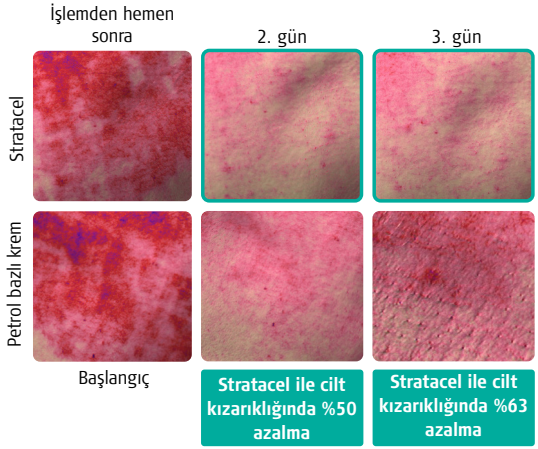

Klinik sonuçlar: Stratacel® ile Öncesi ve Sonrası

Kompleks Düzeltici Cilt Yenileme - Yüz[3]

Dr. Marini - SDC Cilt Doktorları Merkezi, Trieste, İtalya



Fkraksiyonel işlem öncesi | İşlem sonrası, Stratacel ile tedaviye başlama | Stratacel ile 9 günlük tedaviden sonra

Fraksiyonel Lazer Cilt Yenileme - Ağız çevresi [4]

Dr. M. Sandhofer - Linz, Avusturya



Fraksiyonel işlem öncesi | İşlem sonrası, Stratacel ile tedaviye başlama | Stratacel ile 10 günlük tedaviden sonra

Lazerle Cilt Yenileme - Akne yara izleri[4]

Dr. M. Sandhofer - Linz, Avusturya



Fraksiyonel işlem öncesi | İşlem sonrası, Stratacel ile tedaviye başlama | Stratacel ile 7 günlük tedaviden sonra

Fraksiyonel Lazer Cilt Yenileme - Göz çukuru çevresi[3]

Dr. Marini - SDC Cilt Doktorları Merkezi, Trieste, İtalya



İşlem sonrası, Stratacel ile tedaviye başlama | Stratacel ile 7 günlük tedaviden sonra

Kullanim talimatlari



1. Uygulama yapılacak cildin veya yüzeysel yaranın temiz olduğundan emin olun. Jeli sürmeden önce, bölgedeki aşırı eksüdayı (yara sıvısını) temiz bir bez veya pamukla nazikçe tampon yaparak kurulayın.



2. Stratacel'i doğrudan etkilenen bölgeye çok ince bir tabaka halinde sürün ve jel kuruyana kadar bekleyin. Doğru miktarda uygulandığında Stratacel 5-6 dakika içinde kendiliğinden kurur. Ciltte reaksiyon riskini en aza indirmek için Stratacel, uygulama yapılan cilt bölgesine doğrudan temas eden ilk katman olarak sürülmelidir.



3. Eğer jelin kuruması uzun sürüyorsa, muhtemelen gereğinden fazla ürün uygulamışsınızdır. Bu durumda, cildin üzerindeki fazlalığı temiz bir peçete veya gazlı bezle hafifçe silerek alın ve kalan jelin kurumasını bekleyin. Eğer üzerini tıbbi bir sargı/bandaj ile kapatacaksanız, jelin kurumasını beklemenize gerek yoktur.



4. Stratacel kuruduktan sonra üzerine güneş kremi ve makyaj ürünleri uygulayabilir veya kıyafetlerinizi giyebilirsiniz. Gün içinde cildinizde kuruluk veya gerginlik hissederseniz, Stratacel'i ihtiyaç duyduğunuz sıklıkta yeniden uygulayabilirsiniz.

En iyi sonuç için ipuçları

- İşlem sonrasında cildinizde oluşabilecek yanma hissini daha hızlı yatıştırmak için, Stratacel'i kullanmadan önce buzdolabında saklayabilirsiniz.
- Jel cildin altına nüfuz etmez (yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturur) dolayısıyla ovarak sürmek ürünün etkisini artırmaz. Sadece ince bir tabaka halinde sürmeniz yeterlidir.
- Stratacel, genel sonuçları iyileştirmek için doktorunuzun tavsiye ettiği diğer destekleyici tedavilerle birlikte kullanılabilir.
- Doktorunuz aksini belirtmediği sürece, Stratacel'i cildinize sürdüğünüz başka bir medikal/tıbbi kremin üzerine uygulamayın.
- En iyi sonucu almak için Stratacel'in cildinizle sürekli temas halinde olması gerekir. Bu nedenle ürünü 7 gün 24 saat cildinizde (gerekirse yenileyerek) bulundurmaya özen gösterin.

Ek talimatlar

- Stratacel **günde bir veya açıkta kalan bölgeler için günde iki kez uygulanmalıdır.** Jelin ciltle temasının kesilmemesi için ihtiyaç duydukça veya doktorunuzun önerdiği sıklıkta kullanımı tekrarlayabilirsiniz.
- Stratacel'in **işlemden hemen sonra kullanılması önerilir.** Kullanıma, cildiniz tamamen iyileşene kadar devam edilmelidir
- Cilt yüzeyini soyan veya yenileyen daha yoğun işlemlerden sonra, **ürünün en az 30 gün boyunca** veya ciltteki iyileşme tamamlanana kadar sürekli kullanılması tavsiye edilir.
- İşlem görmüş cildin su kaybetmesi kuruluk ve gerginlik hissine yol açar; Stratacel ise bu su kaybını önler. Cildinizde kuruluk hissederseniz nemlendirici sürmek yerine Stratacel'i daha sık uygulayabilirsiniz.
- Eğer mutlaka nemlendirici kullanacaksanız, Stratacel'in ciltle doğrudan temasını engellememek için jelin tamamen kurumasını beklemelisiniz. Unutmayın ki sıradan nemlendiriciler (Stratacel'in aksine) hassaslaşmış cildinizde tahrişe neden olabilir. Ayrıca Stratacel üzerine başka ürünler sürmek, jelin etkisini azaltabilir.

Ne Kadar Stratacel® Kullanmalıyım?



Stratacel, gelişmiş özel formülü sayesinde her uygulamada sıradan nemlendirici krem veya jellere kıyasla çok daha az miktarda ürün gerektirir.

Stratacel 10g
6x6 cm'lik bir uygulama alanına, günde 2 kez olmak üzere **60 günden fazla** süre yetecek miktarda jel içerir.



Stratacel 20g
6x12 cm'lik bir uygulama alanına, günde 2 kez olmak üzere **60 günden fazla** süre yetecek miktarda jel içerir.



Stratacel 50g
12x15 cm'lik bir uygulama alanına, günde 2 kez olmak üzere **60 günden fazla** süre yetecek miktarda jel içerir.



Stratacel®

Fraksiyonel işlem sonrası gelişmiş pansuman

Stratacel® – Fraksiyonel işlemler sonrasında daha hızlı iyileşme ve günlük hayata daha kısa sürede dönüş

Fraksiyonel işlemlerden hemen sonra uygulanabilir. Kuruduktan sonra üzerine güneş koruyucu veya makyaj ürünleri sürülebilir

Stratacel, nemli bir iyileşme ortamı sağlayarak aşağıdaki etkilere öncülük eden bir pansumandır:

- Daha hızlı iyileşme
- İltihaplanma, kızarıklık ve yanma hissinde azalma

Yarı kapatıcı (semi-oklüsif) ve gaz geçirgen olması sayesinde cildin nefes almasını ve nemli kalmasını sağlar

Koruma bariyeri bozulmuş, hasar görmüş cildi kimyasal ve mikrobik etkilerden korur

Evde rahatça ve kolayca uygulanabilir



Stratacel® veya Stratpharma ürünleri, tedarik, siparişler vb. ile ilgili sorularınız için Türkiye Distribütörü - Saf Sağlık Hizmetleri A.Ş üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:
+90 212 287 44 77 veya info@safsağlik.com

www.stratacel.tr

Dikkat: Her zaman etiketi okuyun ve mutlaka verilen talimatlara uygun şekilde kullanın. Yalnızca harici kullanım içindir. Kullanım Talimatlarına bakın. Mutlaka verilen talimatlara uygun şekilde kullanın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Daha fazla talimat için lütfen Hasta Bilgilendirme Broşürüne (HBB) bakın. **İçindekiler:** Polidimetilsiloksanlar, siloksanlar, alkilmetil silikonlar

Kaynaklar: 1. Gold, M. ve diğerleri. (2019). *J of cosmetic dermatology*, 18(2), sayfa 524-529. 2. Marini, L. (2017). *J of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 32(1), sayfa. 113-116. 3. Leonardo Marini'nin izniyle, MD - SDC Cilt Doktorları Merkezi Trieste, İtalya, 2017. 4. Sandhofer, M., Schauer, P. (2012) *Skinmed*, 10(6), s. S1-S7.

Üretici: Stratpharma AG Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basel, İsviçre

Türkiye Distribütörü: Saf Sağlık Hizmetleri A.Ş. Ayazma Cad. Papirüs Plaza No:37 34406, İstanbul - Türkiye. www.safsaglik.com

Stratacel, CE uygunluk işaretine sahip Sınıf IIa Tıbbi Cihazdır.
Stratacel, FDA kayıtlı Sınıf I Tıbbi Cihaz statüsündedir.
Stratacel, T.C. Sağlık Bakanlığı ÜTS kaydına sahiptir.

CE 2797 FDA REGISTERED

Switzerland Stratpharma Heal Better™

SC-TR-026-1-1026